

sigvaris



Style

MEDITSIINILISED
KOMPRESSIOONSUKAD

Ela oma elu. Ole sina ise.

See moto juhib meid.

See on suunatud meie kompressioonlahenduste kandjatele. Nead on meie tähelepanu keskmes. Väga paljude erinevate meditsiiniliste ja isiklike vajadustega inimesed. Inimesed, kes soovivad vaid ühte – elada aktiivset elu oma stiilile truuks jäädes. Ilma mingite mööndusteta.

Me soovime arendada inimestele parimaid kompressioonlahendusi. Kõik inimesed peaks ennast hästi tundma. Iga päev. Me oleme sellele keskendunud juba üle 150 aasta.

Meie meditsiiniliste kompressioonsukkade Premium tooteportfell koosneb järgmistest erinevatele vajadustele ja näidustustele suunatud segmentidest:

- Essential
- Style
- Active
- Specialities

Iga segment on disainitud eesmärgiga pakkuda teile mitte lihtsalt sobivat, vaid ka parimat kompressioonlahendust. Ühest küljest on tähelepanu keskmes toime ja meditsiinilised aspektid, teisalt aga peaks tooted tagama teile ka hea enesetunde ja aitama teil elada oma elu ilma piiranguteta.

Iga inimene on unikaalne ja tema vajadused kompressioonlahenduste järele võivad muutuda konkreetsest olukorrast sõltuvalt. Näiteks Essential segmenti toode võib osutada sobivaks päeval, ent öhtul välja minnes võib sobida paremini Style segmenti toode. Või keegi võib otsustada kasutada Active segmenti toodet päeval tööl olles, ent valida kodusteks puhketundideks Essential segmenti toote.

Me sobitame oma tooteid teie klientide eluviisiga.

Käesolev dokument kirjeldab detailsemalt Style segmenti. See sobib perfektselt kõigile teie naissoost klientidele, kellele on eriti tähtsad moodi puudutavad aspektid.

Kõik Style segmenti tooted valmivad St Gallenis ja esindavad seega Šveitsi kvaliteeti. See on miski, mille üle me tunneme suurt uhkust.



*«Ma armastan moodi ja värve.
Mulle on nii kontoris, kodus kui peol
tähtsad ka veetlevad detailid toodetel.
Leian endale sobivad kompressioonsukad
Style segmendist.»*

(Petra S, 38-aastane)

Style

Moodsad sukad

Style segmendi kompressioonsukki iseloomustab eelkõige veetlev moekus. Need võimaldavad kandjal väljendada oma isiksuse erinevaid tahke ja rõhutada oma individuaalsust. Style segment pakub sobivaid sukki ka erilisteks puhkudeks.

Selle segmendi mudelid on disainitud tagama kandjale elegantset, enesekindlat ja veetlevat välimust. Need veenavad oma peenete detailidega ja sobivad ühtviisi hästi nii õhturiietusega kui kontoris.

Sisukord

Style SEMITRSPARENT	lk 7
Suuruste süsteem	lk 11



Style SEMITRANSSPARENT



Naistele

Style SEMITRANSSPARENT lummas oma stiilse, elegantse karisma, uuenduslike detailide ja maksimaalse mugavusega kandmisel. See vastab stiili ja moekuse poolest kõrgeimatele nõudmistele ja veenab oma poolläbipaistva välimusega.

Need sukad on disainitud spetsiaalselt naiste vajadustele mõeldes. Naiselik esteetika peegeldub näiteks värviliosa välimuses, «push-up» efektiga püksteosas ja unikaalses Sensinova elastikust ülaservas.

Te valmistate Style SEMITRANSSPARENT toodetega rõõmu neile kandjale, kes soovivad õrnalt läbipaistvaid peeneid ja elegantseid kompressioonsukki päevatööl kandmiseks või erilisteks puhkudeks.



poolläbipaistvad
Peened:
elegantne poolläbipaistev välimus



elegantsed
Stiilsed:
naiselik esteetika:
saadaval ka neljas
trendikas värv



perfektne vormimine
Veetlevad:
vormivad optimaalselt
jalgu ja tuharaid



Style SEMITRANSSPARENT tootevaliku ülevaade

SSE vastavuse kood		 A-D Põlvikud		 A-G Sukad	 A-T Sukapüksid	 A-T Rasedatele
		Pehme ülaser	Elastikust ülaser	Elastikust ülaser	Pehme ülaser	Pehme ülaser
Kompressiooni- klass	1	●		●	●	●
	2	●	●	●	●	●
Varbaosa		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
Elastikust ülaserv	Sensinova elastikust ülaserv			●		
	Quadrinova nupsulisest elastikust ülaserv		●	●		
Värvid	● must ● karamell ● savann	●	●	●	●	●
	● nahavärvi	●		●	●	●
Tellimisel valmistatavad tooted:	● hall ● tumesinine					
	● tõeline sinine* ● jahe helehall*	●		●	●	●
	● sügav kahvatulilla* ● õnnelik kollane*					

Värvivalik



*Saadaval alates 1.3.2021

Toote omadused



Veetleva ülaosaga sukapüksid (A–T)
Väga mugavad kanda tänu diskreetselt ruutja disainiga laiale mugavalt istuvale värvliosale.



Mugava elastikust ülaservaga põlvikud (A–D)
Elastikust ülaservaga põlvikud on tänu äärise laiale ja eriti pehmele koele mugav kanda ja need istuvad laitmatult jalgas.



«Push-up» efektiga sukapüksid (A–T)
Perfektselt vormitud lõige kerge «push-up» efektiga tuharate piirkonnas.



Kvaliteetne tallatugevdus
Tallatugevdus katab täpselt kandmisel suurima pinge all oleva ala.



Sensinova elastikust ülaserv
Ülimalt mugavad kanda, õrna, naiseliku puudutusega. See elastikust ülaserv toetab perfektselt igas olukorras ega ole kohmakas.



Eriti mugav varbaõmblus
Eriti peen ja lame varbaõmblus suurima võimaliku mugavuse tagamiseks jalgadele.



Quadrinova nupsulisest elastikust ülaserv
Ruudukujulised nupsud on naha vastas meeldivad ega jäta kandmisel peaagu üldse jälgi. Pehme kaitsva õmblusega ülaosal.



Uus alates märtsist 2021: eriti pehmest elastikust ülaserv
Meeldivalt pehme elastik veel suurema mugavuse tagamiseks kandmisel.

Erimudelid

Elastikust ülaservaga põlvikud
See alternatiivne põlvikute mudel tagab veel parema jalgas püsimise, kui pehme ülaservaga põlvikud peaks alla libisema. Nende kasuks otsustatakse peamiselt väikeste sääremarjade puhul (s.t kui ümberrõõtude cC ja cD vahe on väike).

Sukapüksid rasedatele
Kohandatud spetsiaalselt rasedusaegsete vajaduste rahuldamiseks oma helde kehaosaga, mis ei avalda tarbetut survet. Sobivad ka suurema ümberrõõduga alakehaga naistele.

Hea teada

Hooldus

Sukki tuleks pärast kandmist pesta käsitsi või pesuvõrku pandult maksimaalselt 40 °C juures pesumasina õrnpesu tsükliga. Tähtis on kasutada õrnatoimelist detergenti ilma riidepehmendajata. Sigvarise pesulahus sobib kasutamiseks käsitsipesul.

Teavitage oma kliente, et me ei soovita kasutada kuivatit ega sukki kütteseadmetel kuivatada nende maksimaalse vastupidavuse säilimiseks. Sukki ei tohi triikida ega kuivpuhastada. Sukki tuleks hoida kuivas kohas toatemperatuuril otsese päikesevalguse eest kaitstult.



Need märgid kohustavad meid tagama kõrgeimat kvaliteeti.

Me täidame kõiki RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (Saksamaa Kvaliteedi Tagamise ja Märgistamise Instituudi) poolt meditsiinilistele kompressioonsukkadele kehtestatud kvaliteedi ja testimisega seotud regulatsioone ja seega standardi DIN 58133 nõudeid. Meie meditsiinilised kompressioonsukad on testitud inimökoloogia osas ja need vastavad rahvusvaheliselt siduva Eco-Tex standardi 100 nõuetele. Meie meditsiinilised kompressioonsukad vastavad asjakohaste ELi määruste peamistele ohutuse ja toimivusega seotud nõuetele.



Jalga panemine ja jalast ära võtmine

Mõnel kandjal võib olla raske kompressioonsukki jalga panna ja jalast ära võtta.


Soovitage oma klientidel vaadata meie veebisaidilt praktilisi jalga panemise ja jalast ära võtmise videoid.



Suuruste süsteem

Style SEMITRANSSPARENT tootevaliku suuruste süsteem – ümbermõõdud ja pikkused

		Ümbermõõt, cm											
		XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CT		60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH		75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	Ilma elastikust ülaseravata	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	Elastikust ülaseravaga	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF		38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE		29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD		23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC		25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁		22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY		27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

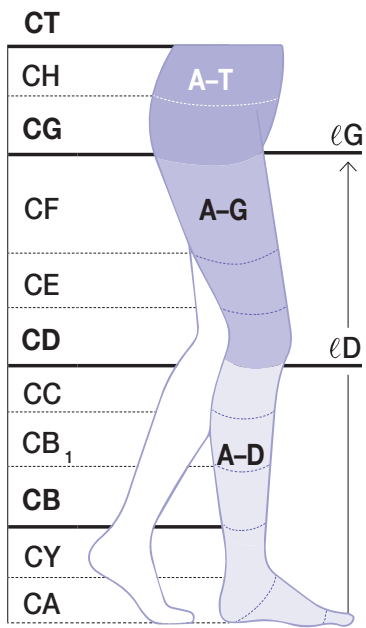

Pikkus, cm					
		lühikesed	56 – 64		
normaalsed	35 – 40	normaalsed	65 – 74	normaalsed	65 – 74
pikad	41 – 45	pikad	75 – 84	pikad	75 – 84

Kui te ei leia otsitavat meie suurest Style SEMITRANSSPARENT standardsest mudelivalikust, siis varustame teid meeleldi tellimusel valmistatud Style SEMITRANSSPARENT toodetega.

A-D = põlvikud, A-G = sukad, A-T = sukapüksid, A-T Rasedatele = rasedatele ja suurtele naistele: ümbermõõte CH ja cT asendab spetsiaalne kohanduv püksteosa

sigvaris

Eksport

SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8

9014 St Gallen

Šveits

Telefon: +41 71 272 40 00

Faks: +41 71 272 40 01

Suur-Britannia

SIGVARIS BRITAIN LTD

1 Imperial Court

Magellan Close

Andover

SP10 5NT

Telefon: +44 1264 326 666

Faks: +44 1264 369 950

Austraalia/Uus-Meremaa

SIGVARIS (Austraalia) Pty Ltd

207 Victoria Street

West Melbourne VIC 3003

Telefon: 1300 SIGVARIS (1300 744 827)

Faks: +61 39329 3773

info.au@sigvaris.com

Lähis-Ida

SIGVARIS AG (DMCC Branch)

Unit No: AG-05-C

Silver (AG) Tower

Jumeirah Lakes Towers

Dubai – Araabia Ühendemiraadid

Telefon: +971 4 558 6265

Faks: +971 4 558 6269

middle-east@sigvaris.com

www.sigvaris.group

Me oleme pühendunud sellele, et aidata inimestel end võimalikult hästi tunda. Iga päev.

SIGVARIS ja SIGVARIS GROUP on SIGVARIS AG (CH-9014 St Gallen/Šveits) registreeritud kaubamärgid paljudes riikides üle kogu maailma.
© 2020 SIGVARIS AG, CH-9014 St Gallen/Šveits

SIGVARIS
GROUP